



Prevena™

Incision Therapy

3M™ Prevena™ Therapy met Customizable of Peel & Place 35cm Dressing i.c.m. de 3M™ Prevena Plus™ unit

Dit document is niet bedoeld als uitgebreide handleiding. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Prevena Plus™-incisiebehandelsysteem voor behandelaren of neem contact op met GD Medical (distributeur 3M) voor aanvullende veiligheidsinformatie en gebruiksinstructies.


LET OP: Als het wondverband de navel bedekt, moet de navel eerst volledig worden gevuld met antimicrobieel vaselinegaas, voordat het wondverband wordt aangebracht.

Aanbrengen op lineaire incisie




TIP: Breng het verband met twee personen aan.


1. Knip het foamverband op de lengte die nodig is om de incisie te bedekken.
LET OP: Knip het foamverband niet boven de wond. Wrijf uit de buurt van de patiënt over de randen van het verband om eventuele fragmenten en losse deeltjes te verwijderen.

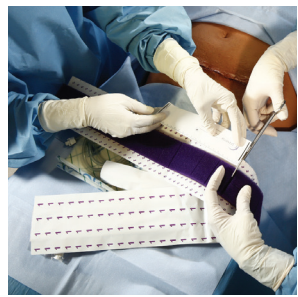

2. Verwijder bescherm laag 1 aan de onderkant van het foamverband, zodat de kleefstrips en de witte stof aan de onderkant van het foamverband bloot komen te liggen. Plaats de witte stof direct op de incisie.

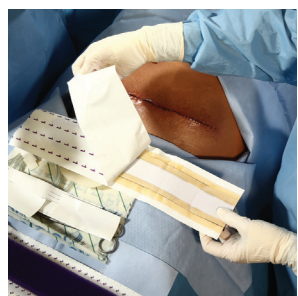


3. Plak hydrocolloïde strips op de uiteinden van het foamverband. Zorg ervoor dat de ene helft van de hydrocolloïde strip zich op het verband bevindt en de andere helft erbuiten.
TIP: Plaats bij diepe / lastige plooien altijd stuk hydrocolloid om luchtlekages te voorkomen. Plooi goed spreiden en dan aanbrengen.

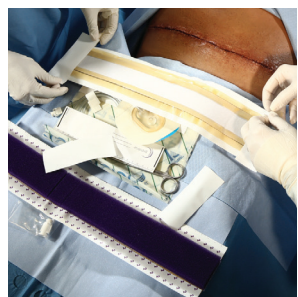

5. Positioneer het foamverband met de aangebrachte hydrocolloïde strips zodanig dat het kleefmateriaal en de witte stof naar beneden zijn gericht. Centreer het foamverband boven de incisie/chirurgische sluiting. Druk de kleefstrips over de gehele lengte aan om ervoor te zorgen dat deze goed aan de huid hechten.




6. Verwijder bescherm laag 2 van de bovenkant van de kleefstrips.

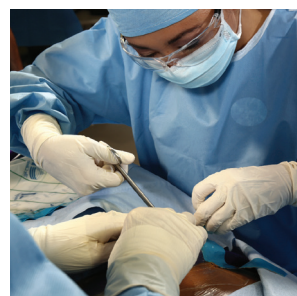


7. Knip de V.A.C.®-folie zo nodig op maat.

TIP: Breng zo nodig huidbescherming aan.

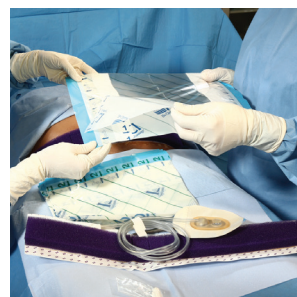


8. Verwijder voorzichtig het middelste gedeelte van laag 1 van de V.A.C.®-folie, zodat het kleefmateriaal bloot komt te liggen. Laat de twee uiteinden van laag 1 intact om de stabiliteit van de folie tijdens het aanbrengen te behouden. Pak de V.A.C.®-folie vast bij de blauwe stroken.

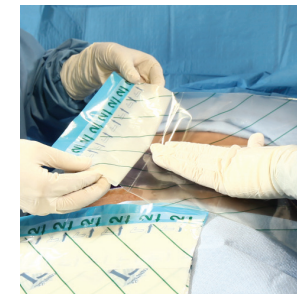


9. Breng de V.A.C.®-folie met de kleefzijde naar beneden aan op het foam en de intacte huid en verwijder de bescherm lagen. Controleer of de V.A.C.®-folie minimaal 3 cm intact weefsel rondom de wond bedekt.


TIP: Trek niet aan de folie en rek de folie niet uit voordat u deze op de huid aanbrengt. Te strak plakken kan huidirritatie of blaren veroorzaken.

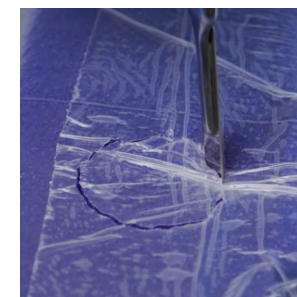

10. Bepaal waar u de TRAC pad wilt plaatsen. Plaats de slangen zodanig dat het vocht optimaal en ongehinderd kan stromen en plaats de slangen niet over uitstekende botgedeeltes of in weefselplooien. Knip voorzichtig een opening in de V.A.C.®-folie met behulp van een scalpel of een schaar. Het is niet nodig om in het foam te knippen.

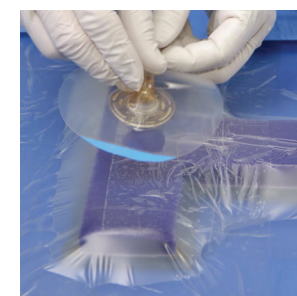

11. Plaats de opening van de TRAC pad rechtstreeks boven het gat in de V.A.C.®-folie.

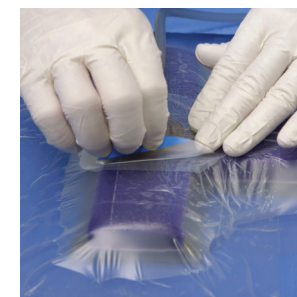


12. Trek aan het blauwe lipje om de stabilisatielaag van de pad te verwijderen. De TRAC pad is nu aangebracht.

LET OP: Plaats de TRAC pad niet rechtstreeks op de navel.

Aansluiten op negatieve druk unit

Optie 1: Aansluiten op de Prevena Plus™ unit

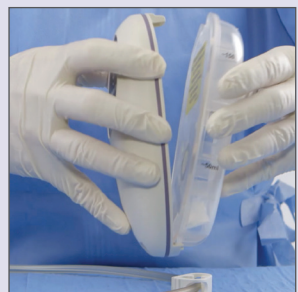

1. Haal de opvangbeker uit de steriele verpakking.
2. Houd het pompje verticaal in de ene hand en houd de opvangbeker horizontaal in de andere hand. Schuif de onderkant van de opvangbeker in de uitsparing aan de onderkant van het pompje.
3. Sluit de opvangbeker tegen het pompje. Het bovenste lipje klikt als de opvangbeker is vergrendeld.



4. Sluit de SensaT.R.A.C.™-wondverbandslang aan op de Prevena Plus™-connector:
 - a. Druk de connector samen
 - b. Draai de connectoren om ze te vergrendelen




5. Sluit de Prevena Plus™-connector aan op de opvangbeker door de connector aan het einde van de slang te verbinden met de slangpoorten aan de zijkant van de opvangbeker. Druk de onderdelen stevig op elkaar. Zorg dat de klem van de slang is geopend. Plaats de klem uit de buurt van de patiënt.




Behandeling starten:

1. Zorg dat het Prevena Plus™ Customizable™-verband is aangebracht zoals hierboven beschreven
2. Houd de aan-uitknop drie seconden ingedrukt om de behandeling te beginnen. Het Prevena Plus™ pompje kan tijdens gebruik enig geluid maken. Alle zeven indicatoren voor de resterende duur van de behandeling lichten groen op om aan te geven dat de behandeling actief is.

Optie 2: Aansluiten op een 3M™ V.A.C.®-unit

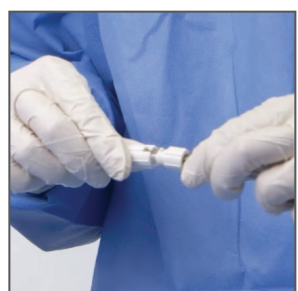

1. Sluit de Prevena Plus™-wondverbandslang aan op de slang van de opvangbeker van de V.A.C.®-unit
 - a. Druk de connectoren samen
 - b. Draai de connectoren om ze te vergrendelen

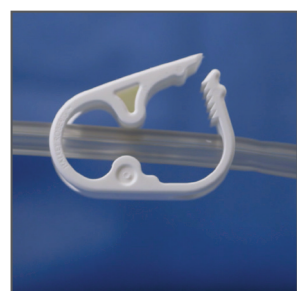

2. Zorg ervoor dat de klem van de slang van de opvangbeker is geopend.




3. Plaats de opvangbeker stevig in de V.A.C.®-unit en zorg ervoor dat de klem op de slang van de opvangbeker is geopend.
4. Stel de druk op de V.A.C.®-unit in op -125 mmHg, continue modus. Start de behandeling.

Lekkage van het Prevena Plus™-systeem oplossen



1. Oefen rondom via de folie druk uit op het kleefmateriaal om ervoor te zorgen dat dit goed vasthecht. Gebruik uw vingers om eventuele vouwen en rimpels glad te strijken.

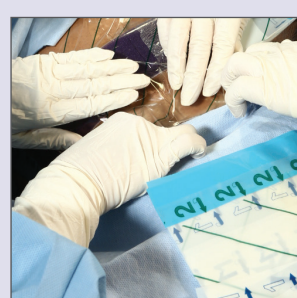

2. Gebruik extra V.A.C.®-folie langs de buitenrand van de afdekfolie om eventuele lekken te dichten.



3. Zorg ervoor dat de opvangbeker stevig vastzit in de behandelunit. Druk de opvangbeker volledig in het pompje, totdat de verdikkingen van de opvangbeker volledig in de uitsparingen van het pompje zitten.



4. Controleer of de slangconnectoren stevig vastzitten en zijn vergrendeld.

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met uw accountmanager of klantenservice van GD Medical of kijken op gdmedicalsupport.nl

Volg de instellingsprotocollen voor procedures omtrent infectiebeheersing en het afvoeren van afval. Lokale protocollen moeten zijn gebaseerd op de geldende milieuriichtlijnen van de lokale overheid.

LET OP: Er bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies voor het PREVENA™-incisiebehandelsysteem. Raadpleeg voorafgaand aan gebruik de gebruiksinstructies in de handleiding voor behandelaren van het PREVENA™-incisiebehandelsysteem.

© 3M 2022. 3M, 3M Science. Applied to Life., Prevena, Prevena Restor en Arthro Form zijn geregistreerde merken of handelsmerken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden.






Prevena™

Incision Therapy


3M™ Prevena™ Therapy met Peel & Place™ Dressings i.c.m. de 3M™ Prevena 125 unit

Dit document is niet bedoeld als uitgebreide handleiding. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Prevena Plus™-incisiebehandel-systeem voor behandelaren of neem contact op met GD Medical (distributeur 3M) voor aanvullende veiligheidsinformatie en gebruiksinstructies.

LET OP: Als het wondverband de navel bedekt, moet de navel eerst volledig worden gevuld met antimicrobieel vaselinegaas, voordat het wondverband wordt aangebracht.

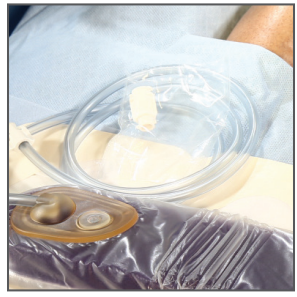

1. Open de steriele verpakking van het verband.

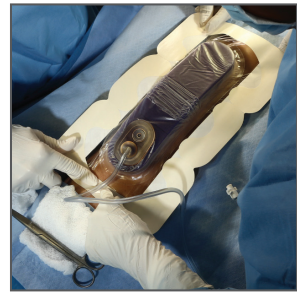

3. Centreer het verband boven de gesloten incisie en breng het aan; zorg er hierbij voor dat het kleefmateriaal de hechting niet raakt of afdekt. Positioneer het verband zodanig op de patiënt dat er geen scherpe bochten of knikken in de slang komen.
LET OP: Trek niet aan het verband en rek het verband ook niet uit, voordat u het op de huid aanbrengt.



5. Druk stevig rondom het verband om te zorgen voor een goede afdichting op plekken waar het kleefmateriaal in contact komt met de huid.



2. Verwijder voorzichtig de middelste bescherm laag van de achterkant van het verband zodat de contactlaag en het kleefmateriaal bloot komen te liggen.

TIP: Breng zo nodig huidbescherming aan.



4. Verwijder de resterende bescherm lagen aan de onderkant door de onderste lipjes vast te pakken en er voorzichtig aan te trekken.




6. Verwijder de bovenste stabilisatielagen.

Aansluiten op negatieve druk unit

Optie 1: Aansluiten op de Prevena™ 125-unit



1. Plaats de opvangbeker in het Prevena 125 pompje en schuif deze naar binnen totdat de opvangbeker vastklikt. De opvangbeker zit goed in het pompje als de verdikkingen aan de zijkanten van de opvangbeker volledig in de uitsparingen aan de zijkant van de behuizing van het pompje zitten.

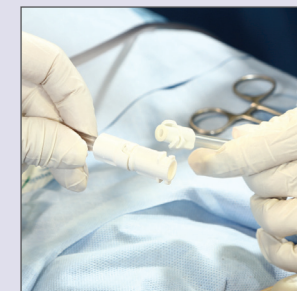


2. Sluit de slang van het verband aan op de slang van de opvangbeker door de connectoren in elkaar te drukken en te draaien, totdat ze zijn vergrendeld.




3. Start de behandeling door de aan-uitknop in te drukken en deze gedurende twee seconden ingedrukt te houden. Door middel van een akoestisch signaal wordt bevestigd dat de behandeling is gestart. Een groen lampje aan de voorkant van het pompje geeft aan dat de behandeling is gestart.

Optie 2: Aansluiten op een V.A.C.®-unit

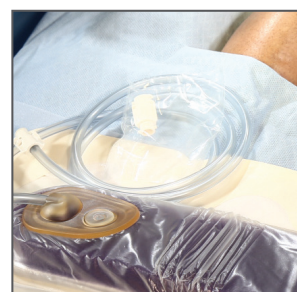

1. De SensaT.R.A.C.™ pad van het Peel & Place verband past op de slang van de opvangbeker van de VAC unit.

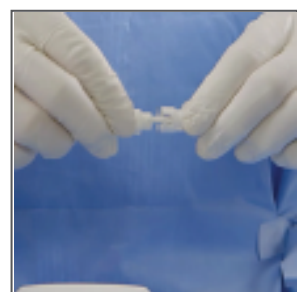


2. Sluit de SensaT.R.A.C.™ pad aan op de slang van de opvangbeker van de V.A.C.®-unit
 - a. Druk de connectoren samen
 - b. Draai de connectoren om ze te vergrendelen




3. Plaats de opvangbeker stevig in de V.A.C.®-unit en zorg ervoor dat de klem op de slang van de opvangbeker is geopend.
4. Stel de druk op de V.A.C.®-unit in op -125 mmHg, continue modus. Start de behandeling.

Het lekniveau controleren op de Prevena™ 125 unit (VISICHECK™-functie)


Druk **snel** tweemaal op de aan-uitknop. Het pompje toont vervolgens drie seconden het lekniveau van het systeem. Om lekalarmen te voorkomen, moet de status van het lekniveau "Optimaal" (één oplichtend lampje) of "Goed" (twee oplichtende lampjes) zijn.

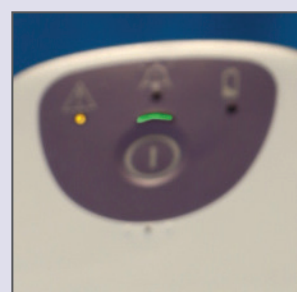

OPTIMAAL
Eén (linker) oplichtend lampje

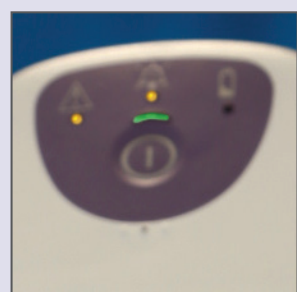

GOED
Twee (linker en middelste) oplichtende lampjes

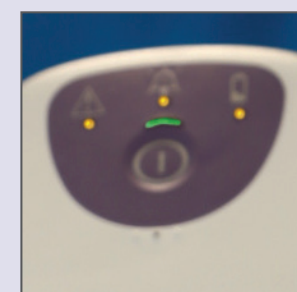


MARGINAAL
Drie oplichtende lampjes

Lekkage van het Prevena™-systeem oplossen



1. Druk, terwijl het pompje/ VAC unit is ingeschakeld, langzaam en stevig op de rand rondom het verband om te zorgen voor goed contact tussen het kleefmateriaal en de huid.

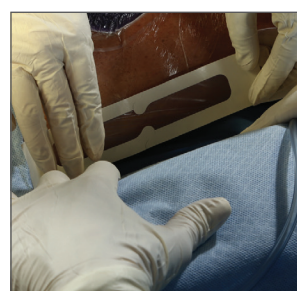

2. Als er een lek wordt geconstateerd, gebruik dan Prevena™-foliestrips (aanwezig in de verpakking van het verband) om lekken langs de rand van het verband te helpen dichten. Als er grote rimpels aanwezig zijn, plaats de foliestrips dan in dezelfde richting als de rimpels en niet haaks op de rimpels



3. Zorg ervoor dat de opvangbeker stevig vastzit in het pompje/de VAC unit.



4. Controleer of de slangconnectoren stevig vastzitten en zijn vergrendeld.

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met uw accountmanager of klantenservice van GD Medical of kijken op gdmedicalsupport.nl

Volg de instellingsprotocollen voor procedures omtrent infectiebeheersing en het afvoeren van afval. Lokale protocollen moeten zijn gebaseerd op de geldende milieuregelingen van de lokale overheid.

LET OP: Er bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies voor het Prevena™-incisiebehandelsysteem. Raadpleeg voorafgaand aan gebruik de gebruiksinstructies in de handleiding voor behandelaren van het Prevena™-incisiebehandelsysteem.

© 3M 2022. 3M, 3M Science. Applied to Life., Prevena, Prevena Restor en Arthro Form zijn geregistreerde merken of handelsmerken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden.

